

## Poradnik dla pacjentów



podaż diety przy pomocy  
pompy Flocare 800

Poradnik dla pacjentów domowego żywienia dojelitowego



# Podaż diety przy pomocy pompy Flocare 800



Elementy pompy:

- A.** Uchwyt
- B.** Prowadnica do komory kroplowej (wgłębienie w obudowie obok uchwytu)
- C.** Prowadnica rurki zestawu podaży diety (pod prowadnicą komory kroplowej)
- D.** Klawiatura
- E.** Wyświetlacz przedstawiający szybkość przepływu w ml/h, wartość całkowitej podanej dawki w ml, objętość aktualnie podanej diety w ml albo symbole oznaczające nieprawidłowe funkcjonowanie pompy
- F.** Rotor
- G.** Pokrętko mocujące (na bocznej ścianie pompy)

## Przygotuj:

- właściwy zestaw do podaży diety przy pomocy pompy Flocare 800 pasujący do opakowania diety,
- przegotowaną i przestudzoną do temperatury pokojowej wodę,
- dietę zgodną z zaleceniami lekarza.


- ① Przygotuj miejsce obok pacjenta do wyłożenia na czystą tacę: diet, strzykawkę i sprzętu do podaży diety.
- ② Umyj dokładnie ręce.
- ③ Pacjent powinien znajdować się w pozycji półleżącej (uniesienie wezgłowia pod kątem 30° - 45° lub większym, jeżeli jest to możliwe).
- ④ Sprawdź położenie zgłębnika i jeżeli jest właściwe, przystąp do dalszych czynności.
- ⑤ Otwórz kapturek łącznika zgłębnika.
- ⑥ Jeżeli na Twoim zgłębniku jest zacisk do regulacji przepływu – otwórz go.
- ⑦ Przepłucz zgłębnik 20-40 ml przegotowanej wody o temperaturze pokojowej.
- ⑧ Jeżeli zaleganie żołądkowe (przed podaniem kolejnej porcji diety do sondy żołądkowej) jest większe niż 200 ml lub większe niż 20% godzinowej podaży, skontaktuj się ze swoim lekarzem.
- ⑨ Sprawdź czy rodzaj diety zgadza się z zaleceniem lekarza.
- ⑩ Wstrząśnij delikatnie pojemnikiem z dietą.
- ⑪ Odkręć butelkę lub worek z dietą, trzymając w pozycji pionowej wylotem do góry.
- ⑫ Otwórz opakowanie zestawu w taki sposób, aby nie dotknąć zakończenia podłączanego do opakowania z dietą. Zaciskiem rolkowym zamknij światło zestawu (przesuń rolkę w dół tak, aby dieta nie mogła przepływać). Połącz odpowiedni koniec zestawu z opakowaniem diety.
- ⑬ Nie dotykaj, ani nie zdejmuj ochronnej folii aluminiowej z opakowania diety. W trakcie dokładnego nakręcania zestawu na dietę, folia aluminiowa zostanie sterylnie przebita.
- ⑭ Zawieś dietę na stojaku do kroplówek na wysokość około 1 metr nad pacjentem. Opakowania w workach posiadają fabryczne otwory do ich zawieszania na stojaku do kroplówek. Butelkę należy umieścić w specjalnym „koszyku” dołączonym do zestawu.
- ⑮ Delikatnie ściśnij komorę kroplową, napełniając ją dietą do około 1/3 wysokości.
- ⑯ Umieść komorę kroplową w gnieździe detektora kropli. Rys. 1
- ⑰ Zdejmij z zestawu żywieniowego nasadkę ochronną znajdującą się na jego dalszym końcu.




# Podaż diety przy pomocy pompy Flocare 800




- 18 Otwórz zacisk rolkowy (przesuwając rolkę w górę) i wypełnij przewód zestawu dietą, aż do jego dalszego, podłączonego do sondy, końca.
- 19 Zamknij zacisk rolkowy i włóż końcówkę zestawu żywieniowego do łącznika zgłębnika i obróć o 90° - ruch ten zapobiega wysunięciu się zestawu z łącznika zgłębnika.
- 20 Owiń silikonowy przewód zestawu dookoła rotora pompy. Rys. 2
- 21 Wprowadź przewód zestawu w prowadnicę w pompie lekko go naciągając. Rys. 3 i 4

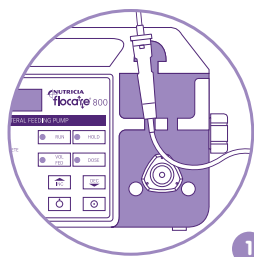


1

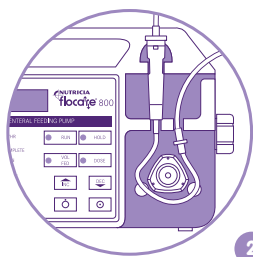



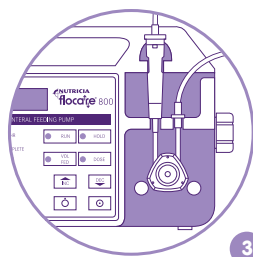


2

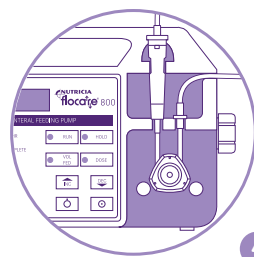

3



4

- 22 Włącz pompę przyciskiem **ON** .
- 23 Ustaw żądaną prędkość przepływu w ml/godz., naciskając przycisk **INC**  lub **DEC** , jeżeli potrzeba. Można również ustawić dawkę diety, naciskając **DOSE** , a następnie INC lub DEC, jeżeli potrzeba.
- 24 Otwórz zacisk rolkowy.
- 25 Rozpocznij podawanie diety, naciskając przycisk **RUN** .
- 26 Po zakończeniu podawania diety odłącz (i wyjmij) końcówkę zestawu żywieniowego od zgłębnika, przekręcając ją z powrotem o 90°.
- 27 Dodatkowe instrukcje obsługi pompy Flocare 800 na stronie: [www.flocare.pl](http://www.flocare.pl).
- 28 Nałóż nasadkę ochronną na końcówkę zestawu żywieniowego.
- 29 Przepłucz zgłębnik 20-40 ml przegotowanej wody o temperaturze pokojowej.
- 30 Zamknij kapturek łącznika zgłębnika.
- 31 Jeżeli na Twoim zgłębniku jest zacisk do regulacji przepływu – zamknij go.

## UWAGA!

Ze względu na ryzyko rozwoju bakterii w przewodzie zestawu i możliwe zakażenie, zestawy żywieniowe do podawania diety należy wymieniać co 24 godziny.

Dieta w workach (opakowania typu Pack) może być podawana przez 24 godziny od momentu otwarcia opakowania, w butelkach w ciągu 8 godzin, a inne diety (np. przygotowane z proszku) mogą być podawane nie dłużej niż 4 godziny od momentu ich przygotowania.

