

# Poradnik dla pacjentów



podaż diety przy pomocy  
pompy Flocare Infinity


Poradnik dla pacjentów domowego żywienia dojelitowego



# Podaż diety przy pomocy pompy Flocare Infinity

**NutriMed  
StoMed**

Nasze wsparcie. Twój dom.

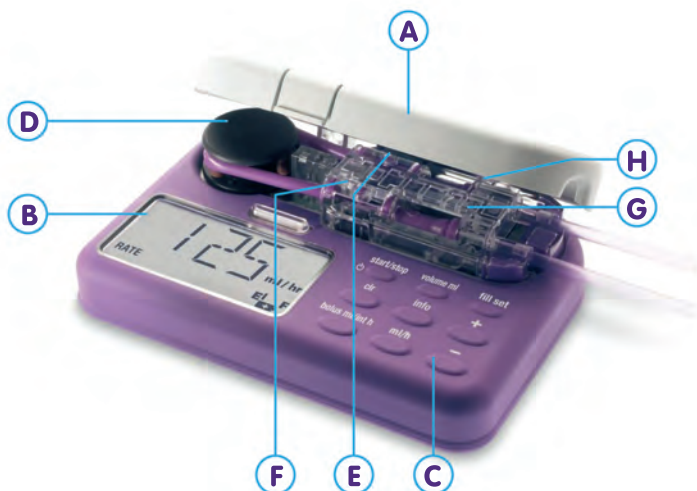

Elementy pompy:

- A. Pokrywa pompy
- B. Wyświetlacz LCD
- C. Klawiatura
- D. Rotor
- E. Czujnik ciśnienia napływu
- F. Czujnik ciśnienia wypływu
- G. Komora do podłączenia zestawu do pompy
- H. Czujnik obecności powietrza
- I. Zacisk stojaka (element dokręcany do tylnej ściany pompy)

## Przygotuj:

- właściwy zestaw do podaży diety przy pomocy pompy Flocare Infinity pasujący do opakowania diety,
- przegotowaną i przestudzoną do temperatury pokojowej wodę,
- dietę zgodną z zaleceniami lekarza.


- ① Przygotuj miejsce obok pacjenta do wyłożenia na czystą tacę: diet, strzykawkę i sprzętu do podaży diety.
- ② Umyj dokładnie ręce.
- ③ Pacjent powinien znajdować się w pozycji półleżącej (uniesienie wezgłowia pod kątem 30° - 45° lub większym, jeżeli jest to możliwe).
- ④ Sprawdź położenie zgłębnika i jeżeli jest właściwe, przystąp do dalszych czynności.
- ⑤ Otwórz kapturek łącznika zgłębnika.
- ⑥ Jeżeli na Twoim zgłębniku jest zacisk do regulacji przepływu – otwórz go.
- ⑦ Przepłucz zgłębnik 20-40 ml przegotowanej wody o temperaturze pokojowej.
- ⑧ Jeżeli zaleganie żołądkowe (przed podaniem kolejnej porcji diety do sondy żołądkowej) jest większe niż 200 ml lub większe niż 20% godzinowej podaży, skontaktuj się ze swoim lekarzem.
- ⑨ Sprawdź czy rodzaj diety zgadza się z zaleceniem lekarza.
- ⑩ Wstrząśnij delikatnie pojemnikiem z dietą.
- ⑪ Odkręć butelkę lub worek z dietą, trzymając w pozycji pionowej wylotem do góry.
- ⑫ Otwórz opakowanie zestawu w taki sposób, aby nie dotknąć zakończenia podłączanego do opakowania z dietą. Zaciskiem rolkowym zamknij światło zestawu (przesuń rolkę w dół tak, aby dieta nie mogła przepływać). Połącz odpowiedni koniec zestawu z opakowaniem diety.
- ⑬ Nie dotykaj, ani nie zdejmuj ochronnej folii aluminiowej z opakowania diety. W trakcie dokładnego nakręcania zestawu na dietę, folia aluminiowa zostanie sterylnie przebita.
- ⑭ Zawieś dietę na stojaku do kroplówek około 1 metr nad pacjentem. Opakowania w workach posiadają fabryczne otwory do ich zawieszania na stojaku do kroplówek. Butelkę należy umieścić w specjalnym „koszyczku” dołączonym do zestawu.
- ⑮ Otwórz delikatnie pokrywę pompy. Rys.1
- ⑯ Umieść kasetkę z pętlą wokół rotora. Rys. 2
- ⑰ Rozciągnij lekko kasetkę zestawu do żywienia, aby go dobrze dopasować do odpowiadającego mu miejsca w pompie. Rys. 3
- ⑱ Zamknij delikatnie pokrywę pompy. Rys. 4
- ⑲ Zdejmij z zestawu żywienia nasadkę ochronną, znajdującą się na jego dalszym końcu.
- ⑳ Włóż końcówkę zestawu żywienia do łącznika zgłębnika i obróć o 90° - ruch ten zapobiega wysunięciu się zestawu z łącznika zgłębnika.




# Podaż diety przy pomocy pompy Flocare Infinity

**NutriMed  
StoMed**

Nasze wsparcie. Twój dom.

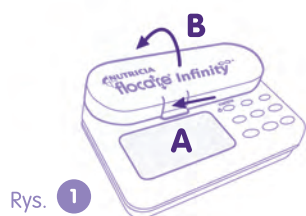


Rys. 1

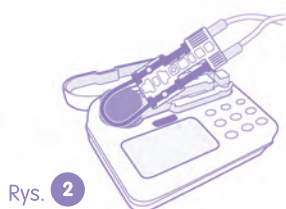

Rys. 2




Rys. 3

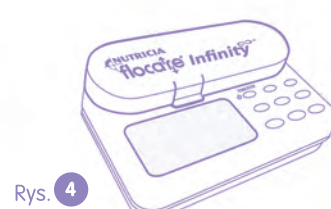

Rys. 4

- 21 Naciśnij na klawiaturze pompy przycisk **ON/OFF**, aby włączyć pompę.
- 22 Naciśnij przycisk **FILL SET** na klawiaturze pompy, aby dieta napełniła zestaw żywieniowy. Pompa automatycznie zatrzyma proces napełniania zestawu, ale można go również zatrzymać w dowolnym momencie, naciskając na klawiaturze pompy ponownie przycisk **FILL SET**.
- 23 Naciśnij **ml/h** na klawiaturze pompy, aby wybrać właściwy program żywienia. Można wybrać parametr „**CONT**” – żywienie ciągłe. Aby rozpocząć żywienie naciśnij **START** na klawiaturze pompy. Można samodzielnie ustawić żądaną prędkość przepływu w ml/godz., naciskając przyciski **+/-**. Aby rozpocząć żywienie naciśnij **START** na klawiaturze pompy. Poprzez naciśnięcie na klawiaturze pompy przycisku **DOSE=VOL** można ustawić dawkę podawanej diety, naciskając przyciski **+/-**. Aby rozpocząć żywienie naciśnij **START/STOP**.
- 24 Aby wyłączyć pompę należy zatrzymać podawanie diety naciskając przycisk **START/STOP**, a następnie nacisnąć przycisk **ON/OFF**.
- 25 Dodatkowe instrukcje obsługi pompy Infinity na stronie [www.flocare.pl](http://www.flocare.pl).
- 26 Po zakończeniu podawania diety odłącz (i wyjmij) końcówkę zestawu żywieniowego od zgiębnika, przekręcając ją z powrotem o 90°.
- 27 Nałóż nasadkę ochronną na końcówkę zestawu żywieniowego.
- 28 Przepłucz zgiębnik 20-40 ml przegotowanej wody o temperaturze pokojowej.
- 29 Zamknij kapturek łącznika zgiębnika.
- 30 Jeżeli na Twoim zgiębniku jest zacisk do regulacji przepływu – zamknij go.

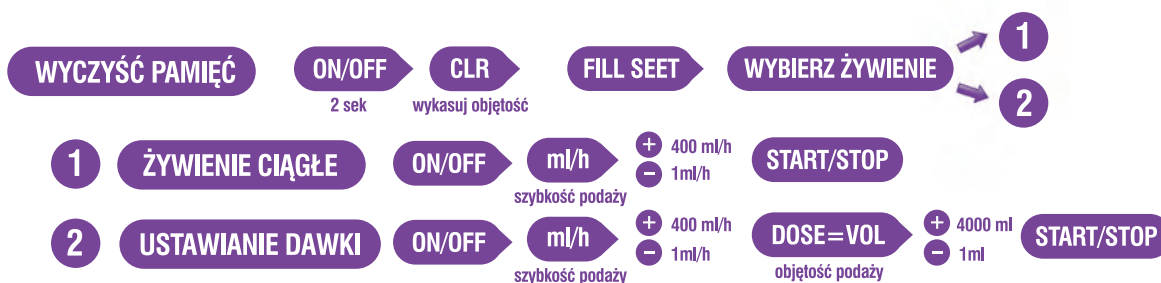

## UWAGA!

Ze względu na ryzyko rozwoju bakterii w przewodzie zestawu i możliwe zakażenie, zestawy żywieniowe do podawania diety należy wymieniać co 24 godziny.

Dieta w workach (opakowania typu Pack) może być podawana przez 24 godziny od momentu otwarcia opakowania, w butelkach w ciągu 8 godzin, a inne diety (np. przygotowane z proszku) mogą być podawane nie dłużej niż 4 godziny od momentu ich przygotowania.

NUTRIMED Polska Sp. z o.o.  
ul. Bobrowiecka 8  
00-728 Warszawa



Infolinia  
801 358 808